

# INDIBA



# Как действует INDIBA?

Про-ионная® система 448 кГц

INDIBA стимулирует естественный процесс метаболизма в тканях без использования внешней излучающей энергии.

В данном приборе используются передовые технологии электротерапии, которые создают переменное электромагнитное поле, воздействующее на свободные электрические заряды, существующие в биологических тканях в форме ионов.

Почему частота именно 448 кГц идеальна?

Частота 448 кГц усиливает ионную мобилизацию через внутриклеточную и внеклеточную матрицу, которая восстанавливает проницаемость потенциала клеточных мембран. Клеточный электрический баланс оптимизирует восстановление тканей, обеспечивая клетки кислородом и питательными веществами посредством системы кровоснабжения организма.

Активизация циркуляции (микроциркуляция и расширение капилляров) стимулирует пролиферацию и фибробластную активность, генерируемую коллагеном.

Результатом этого является регенерация тканей, которой способствует частота в 448 кГц.

# САР режим, эффект воздействия

## ЕМКОСТНЫЙ РЕЖИМ (САР)

Подходит для поверхностных, обильно снабженных сосудами тканей. Реакции, вызываемые емкостным режимом, в основном концентрируются в мягких тканях, лежащих в непосредственной близости от электрода. Электрод спроектирован таким образом, что он может выполнять функцию внешнего конденсатора и обеспечивать локализованное увеличение электро-регенеративной энергии.

Эффект:


- 1) подтяжка, отбеливание и омолаживание кожи;
- 2) борьба с прыщами, уменьшение морщин;
- 3) сжигание жира, уменьшение боли;
- 4) повышение эластичности кожи;
- 5) подтяжка кожи после родов, облегчение мышечной боли;
- 6) уменьшение боли в суставах
- 7) введение лекарств

# RES режим, эффект воздействия

- Подходит для плотных, толстых, жировых и фиброзных тканей. Реакции, вызываемые резистивным режимом, действуют на более глубоких уровнях, и концентрируются на тканях с более высоким сопротивлением, таких как суставы, связки и сухожилия. Этот режим в комбинации с мануальной терапией и кинетическим воздействием позволяет обеспечить концентрацию воздействия электро-регенеративной энергии в этих структурах.
- Эффект режима RES:
  - 1) Лимфодренаж
  - 2) Улучшение кровообращения
  - 3) Восстановление клеток, нервов, костей, мышц и связок
  - 4) Регуляция эндокринной системы
  - 5) Улучшение сна
  - 6) Осветление тона кожи
  - 7) Улучшить проблемы с опусканием груди
  - 8) Улучшение формы тела и борьба с целлюлитом.
  - 9) Похудение
  - 10) Сжигание висцерального жира

# INDIBA Интерфейс


- 1 Кнопка вкл/выкл
- 2 START/STOP
- 3 MENU (в старых моделях)
- 4 CAP режим
- 5 RES режим
- 6 Время +
- 7 Время -

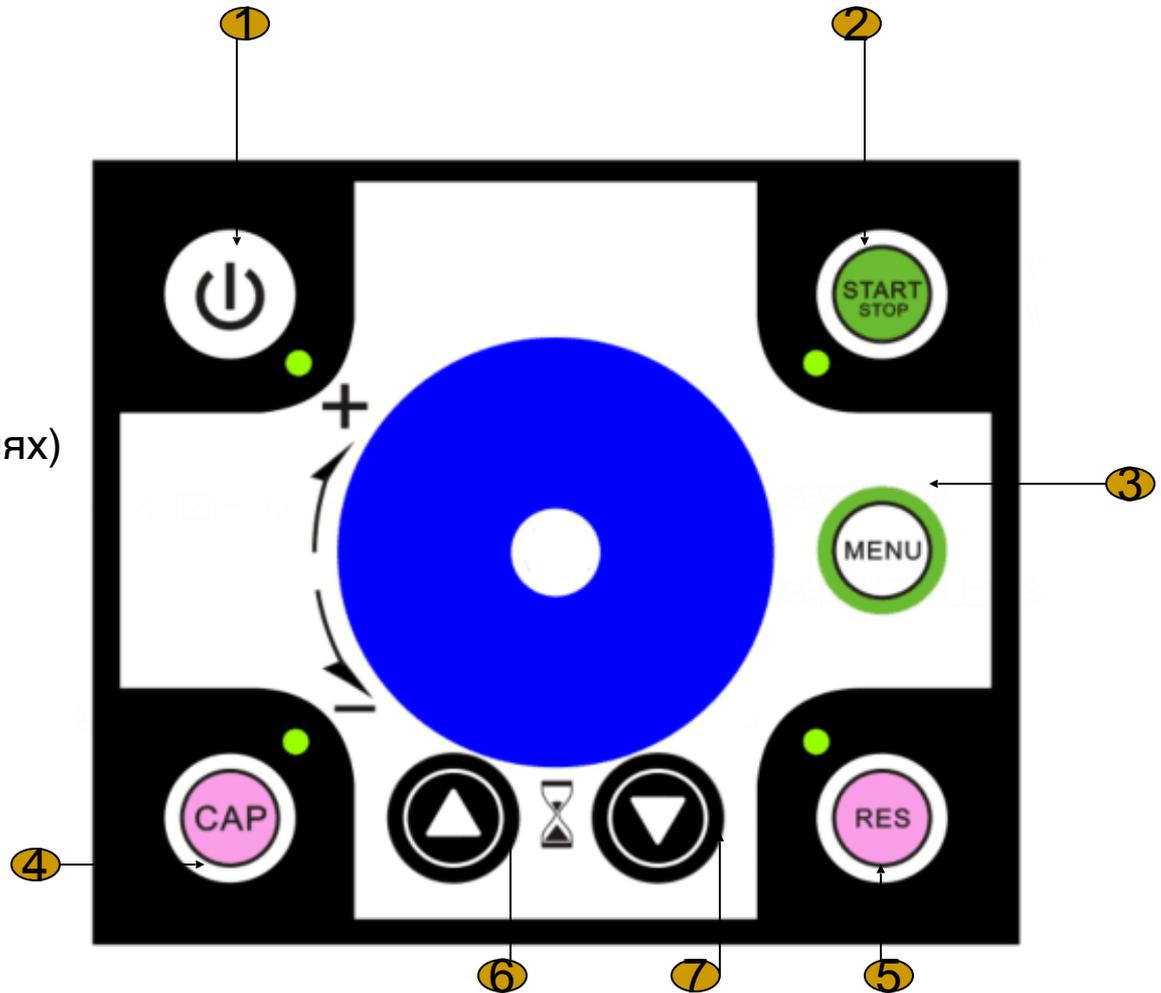

# INDIBA Комплектация



# INDIBA Технология

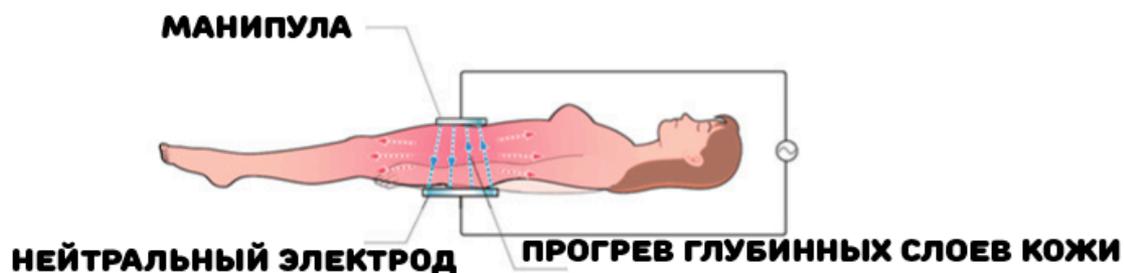

**МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ТАК ЧАСТО,  
КАК ЭТО НУЖНО ПАЦИЕНТУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО СОСТОЯНИЯ**

# САР режим, эффект воздействия

Эффективность ухода за лицом

Основные функции для лица - «улучшение текстуры кожи» и «активация клеток».

Один инструмент Indiba может иметь широкий спектр эффектов действия:

- 1) Улучшение цвета кожи
- 2) Антивозрастное улучшение морщин, пятен и дряблости
- 3) Усиление эффекта сывороток
- 4) Активация клеток лица
- 5) Улучшение метаболизма клеток лица
- 6) Удаление акне
- 7) Подтяжка кожи вокруг глаз
- 8) Улучшение ритма регенерации клеток кожи
- 9) Уменьшение дряблости лица и двойного подбородка
- 10) Уменьшение отека лица
- 11) Борьба с черными точками
- 12) Повышение эластичности кожи шеи



Чтобы усилить действие индиба во время лечения, на лицо наносятся профессиональные лосьоны. Режим Сар эффективно воздействует на зоны лица и верхней части груди. В области шеи много лимфатических сосудов, и цвет кожи лица сильно изменится, если лимфатические сосуды очистятся.

Используйте индиба для отвода лишней влаги из кожи и глубоких слоев, подтяжки всей кожи. В то же время он эффективно сжигает жир, а в зоне вокруг глаз образуется идеальный изгиб. Слабость и припухлость вокруг глаз уменьшаются.

Так же с помощью данной процедуры выводится лишняя влага и жир.

# RES режим, эффект воздействия

- Смысл процедуры RES режима в прогреве глубоких слоев кожи. При повышении энергии внутри растет температура и улучшается метаболизм внутри улеток.
- Процедуру можно выполнять по самочувствию клиента неограниченное количество раз.
- Среднее время процедуры 10-15 минут.



---

## Примеры клинического применения INDIBA

Все последующие лечебные курсы и результаты лечения проводятся как в емкостном, так и в резистивном режимах.

---

---

# Коррекция груди

- Можно начать обрабатывать только одну грудь клиента, чтобы легко увидеть результаты лечения. В зоны процедуры входят: вся грудь, прилегающая область груди и мышцы над грудью.
  - Продолжительность лечения:
  - 10 минут в емкостном режиме.
  - 5 минут в резистивном режиме
  - Выбор проводника:
  - для емкостного режима, диаметр 80 мм
  - Для резистивного режима: диаметр 65 мм
  - Количество процедур: 2 раза
-

---

# Контурирование черт лица

- Продолжительность лечения:
  - 10 минут в емкостном режиме.
  - 5 минут в резистивном режиме
  - Выбор проводника:
  - для емкостного режима, диаметр 35 мм
  - Для резистивного режима: диаметр 35 мм
  - Количество процедур: 1 раз
-

---

# Удаление мешков под глазами

- Во время выполнения данной процедуры очень важно учитывать болевые ощущения клиента, данная область очень чувствительна!
  - Продолжительность лечения:
  - 8 минут в емкостном режиме.
  - 4 минут в резистивном режиме
  - Выбор проводника:
  - для емкостного режима, диаметр 20 мм
  - Для резистивного режима: диаметр 35 мм
  - Количество процедур: 3 раза
-

---

# Целлюлит на ягодицах

- Продолжительность лечения:
  - 8 минут в емкостном режиме.
  - 4 минут в резистивном режиме
  - Выбор проводника:
  - для емкостного режима, диаметр 80 мм
  - Для резистивного режима: диаметр 65 мм
  - Количество процедур: до 9 раз
- 
- Чтобы добиться максимального эффекта во время лечения целлюлита, пожалуйста, используйте INDIBA с кремом для удаления целлюлита, это поможет улучшить результаты от процедуры.
-

---

# Целлюлит на бедрах

- Продолжительность лечения:
  - 15 минут в емкостном режиме.
  - 15 минут в резистивном режиме
  - Выбор проводника:
  - для емкостного режима, диаметр 80 мм
  - Для резистивного режима: диаметр 65 мм
  - Количество процедур: до 9 раз
- 
- Чтобы добиться максимального эффекта во время лечения целлюлита, пожалуйста, используйте INDIBA с кремом для удаления целлюлита, это поможет улучшить результаты от процедуры.
-